


INTERPUPILLOMETRO DIGITALE MSD

MSD

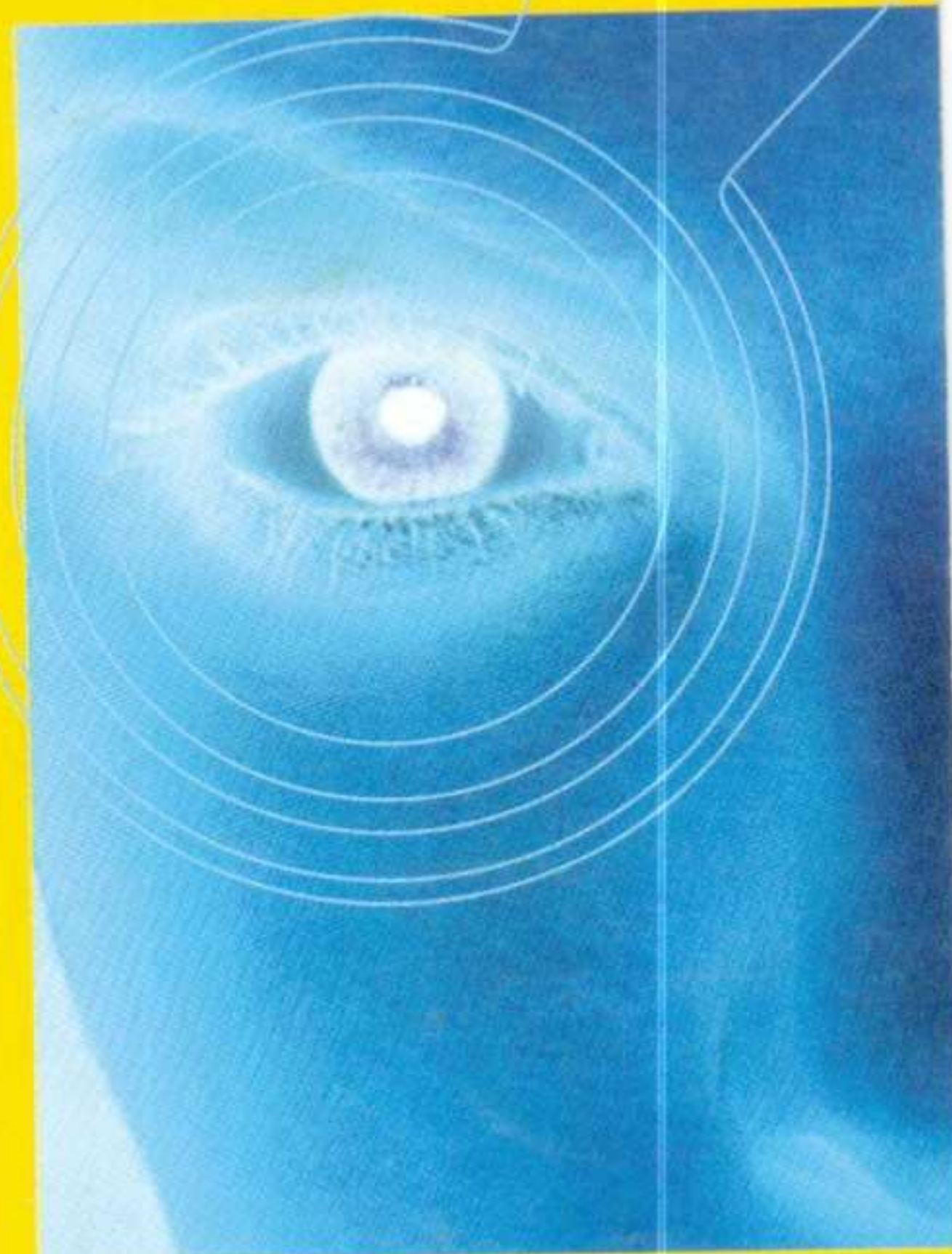

Interpupillometro a coincidenza

Il funzionamento avviene sovrapponendo i punti luminosi riflessi dalle pupille sulla linea di misurazione.

I risultati sono visualizzati mediante cristalli liquidi.

Si possono avere tre tipi di misurazione: occhio dx, occhio dx e sx, occhio sx.

I risultati ottenuti sono calcolati con una accuratezza di 0,25 mm.

È possibile misurare la distanza interpupillare con il punto di fissazione regolabile da 30 cm all'infinito.

Spegnimento automatico dopo un minuto per ottimizzare il consumo delle batterie.

Può essere misurata anche la distanza dell'apice corneale.

Specifiche tecniche

• Metodo di misurazione	interpupillometro a coincidenza
• Scala di misurazione	da 48 a 77 mm (entrambi gli occhi) da 24 a 38,5 mm (occhio singolo)
• Scala minima	0,5 mm
• Regolazione distanza punto di fissazione	da 30 cm all'infinito
• Alimentazione	4,5V DC (3 batterie da 1,5 V)

MSD srl Società Unipersonale
Via Massari Marzoli 13/15
21052 Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331 34 25 10
Fax 0331 34 10 67

www.msdlenses.it

MSD