


## FLIPPER COMBINATO +0.25 +0.75

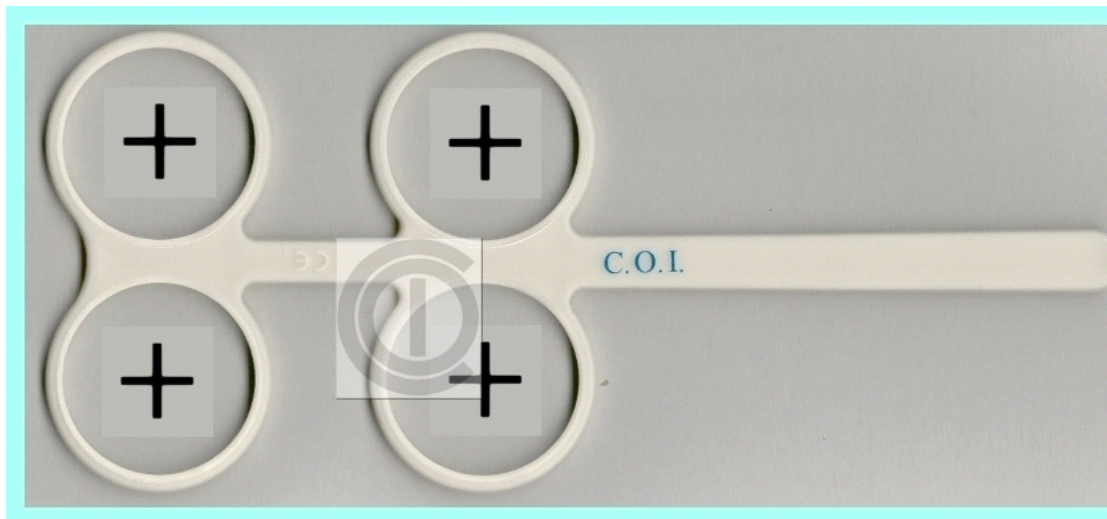

con lenti in vetro - quando si utilizza l'occhiale di prova e l'esecuzione di un test richiede un cambio veloce di più lenti positive come la fase di annebbiamento binoculare, il test #21 (Accomodazione relativa negativa), il #14B (Cilindri crociati fusi) ecc, si consiglia l'uso dei flipper sferici che presentano diverse combinazioni di lenti con differenza di 0.50D - questa disposizione fa sì che si possa variare velocemente il potere delle lenti di 0.25D in 0.25D scambiando un flipper con l'altro - potere inciso su ogni lente

**medivision**

VENDITA E ASS.NZA TECNICA  
ELETTROMEDICALI

VIA E. NICOLARDI, 224 - 80131 NAPOLI

TEL. 081.5922337 - FAX 081.5922335

**medivision@libero.it - [www.medi-vision.it](http://www.medi-vision.it)**